



ROW'S XL EB04.008 / 010

SUGGESTED USE | SUGERENCIAS DE USO

EB04.010
Red colour.
Color rojo



EB04.008
Blue colour.
Color azul



- 1 Comfortable padded shoulder strap makes for easy carrying.
- 2 Full width PVC pocket to hold and display identifying cards and documents.
- 3 Internal and external surfaces are sanitisable and liquid impermeable.
- 4 Handle for easy transport
- 5 Thermometer with external display allows temperature monitoring.

- 1 Bandolera para facilitar el transporte.
- 2 Bolsillo exterior para transportar documentación o identificar el contenido.
- 3 Fabricado en material que permite fácil limpieza y desinfección.
- 4 Asa para facilitar el transporte.
- 5 Termómetro en el exterior para controlar la temperatura interna.

MAIN COMPARTMENT | COMPARTIMENTO PRINCIPAL





EB04.008
Blue colour.
Color azul



- 1 Includes two foam sample blocks, with sufficient capacity for over 80 collection tubes.
- 1 Incluye dos gradillas de espuma para transportar alrededor de 100 tubos de muestras.

BATTERY REPLACEMENT | REEMPLAZO DE PILAS

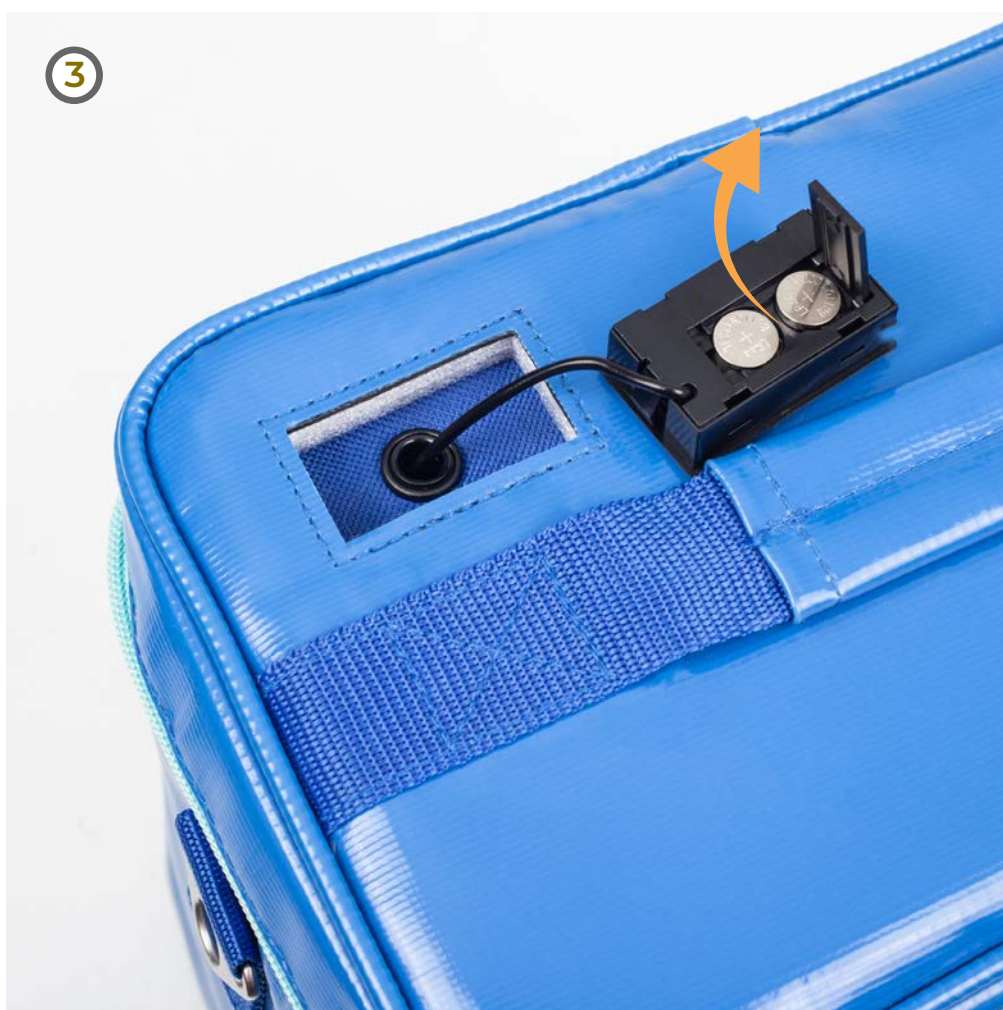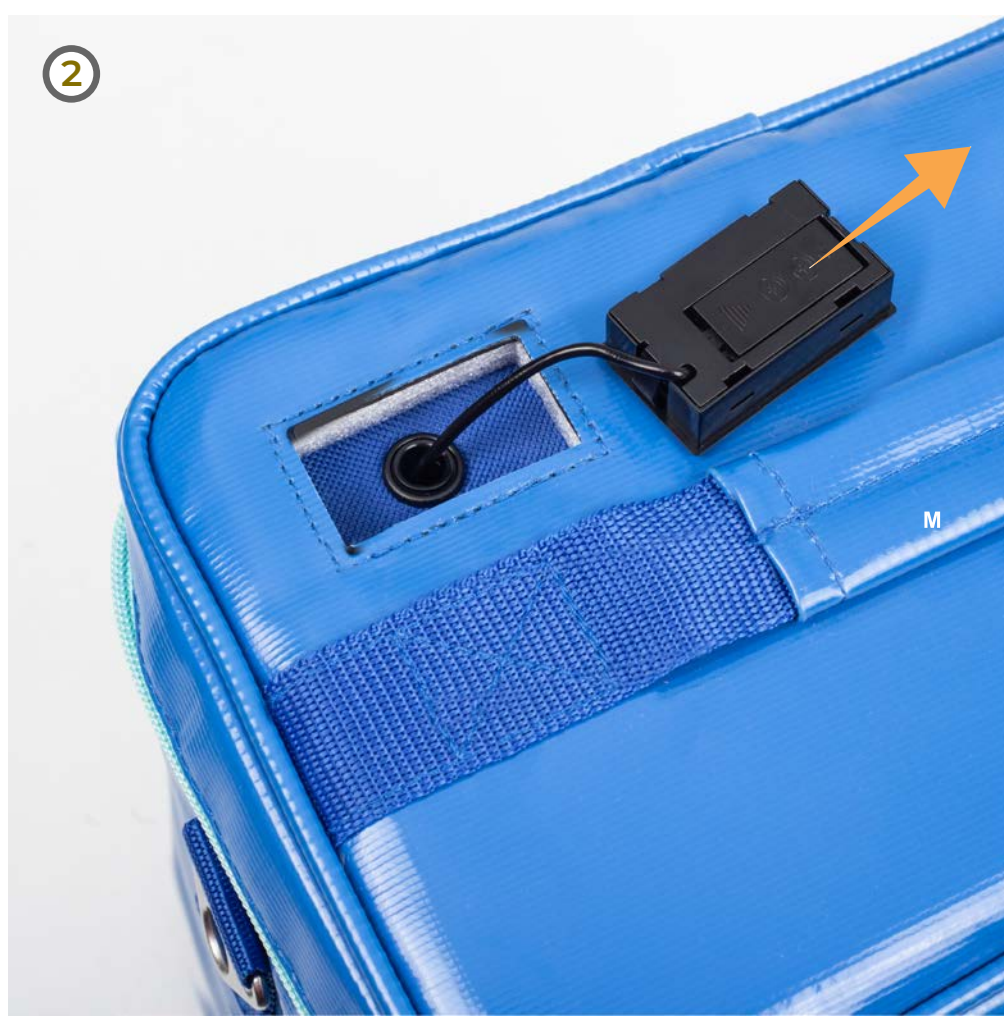

- 1 Remove the LCD module.
- 2 Slide the battery door in the direction indicated by the arrow.
- 3 Open the compartment and replace the exhausted batteries.
- 4 Close the hatch again and insert the module again until it clicks into place.

- 1 Extraiga el módulo LCD.
- 2 Desplace la compuerta de las baterías en la dirección indicada con la flecha.
- 3 Abra el compartimento y sustituya las baterías gastadas.
- 4 Cierre de nuevo la compuerta e introduzca de nuevo el módulo hasta que encaje correctamente.